

Mirage™ Quattro - Full Face Mask

61228 Mirage™ Quattro FFM EUR3 – Extra Small

61229 Mirage™ Quattro FFM EUR3 – Small

61230 Mirage™ Quattro FFM EUR3 – Medium

61231 Mirage™ Quattro FFM EUR3 – Large

CE 0123

Maschera oro-nasale per ventiloterapia – con fori per l'esalazione della CO₂

Classificazione CND: R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE

Progressivo di sistema attribuito al DM: 16143/R

Produttore – ResMed (1 Elisabeth MacArthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australia)

Garanzia – 90 giorni dopo la data d'acquisto.

Anno di immissione sul mercato: 2007



La maschera Mirage™ Quattro FFM è una maschera facciale (oro-nasale) per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO₂ incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa.

La maschera Mirage™ Quattro FFM è composta da una cuffia in triplo strato di neoprene dotata di clips ed una scocca in policarbonato su cui è montato il cuscinetto a doppia membrana in silicone al 100%.

Su telaio sono presenti anche i fori per l'esalazione della CO₂ sulla parte superiore ed un gomito girevole dove è presente una valvola anti-asfissia, che assicura che il paziente respiri anche in caso di interruzione del flusso d'aria dal ventilatore.


La maschera viene fornita assemblata e pronta all'uso.

La maschera non contiene latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

Quando è utilizzata con apparecchiature ResMed, impostare nel menu del ventilatore la voce relativa alla maschera su "MIR FACC.", per ottenere un funzionamento ottimale dell'apparecchio.

La maschera può essere utilizzata con la maggior parte delle apparecchiature pressometriche in commercio che utilizzano un circuito singolo senza valvola espiratoria.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.

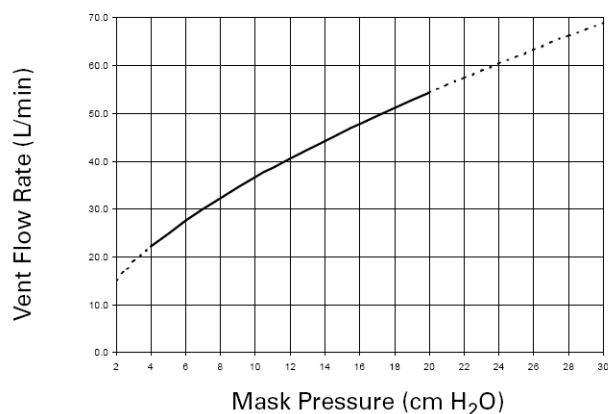

Pressure
(cm H₂O)

Flow
(± 6.0 L/min)

4
8
12
16
20

22
32
41
48
54